

Cardio SW

Estudios de Cardiología a su alcance



Equipos y Programas para

- Electrocardiogramas ✓
- Pruebas de esfuerzo ✓
- Holter 24-72 horas ✓
- Monitoreo de Presión ✓
- Interpretación Remota ✓



Distribuido por

Mediventa

www.mediventa.com



ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL

CV200

Innovación y precisión en electrocardiografía digital.



LO MAS PRACTICO

- Trabaja con cualquier PC o laptop.
- Incluye programa para ECG de Reposo.
- Excelente calidad de registro
- Sin usar papel termo sensible
- Infomes listos para entregar
- Envios de estudios via Internet.

IDEAL PARA

- Laboratorios de diagnóstico
- Consultorios y clinicas
- Medicina Laboral
- Interpretación remota



ECG DIGITAL

CV200 se utiliza en cualquier computadora o laptop junto con el programa CardioSW-RestECG.

- Conexión USB
- Sin baterías
- 12 derivaciones simultáneas
- Calidad digital con filtros para eliminar interferencias
- Precisión de 16 bits
- Frecuencia de 1000 Hz



CARDIOSW-RESTECG

Programa incluido para la realización e interpretación de ECG en reposo.

- Base de datos de pacientes
- Registro en un solo paso
- Mediciones automáticas
- Interpretación automática editable
- Informes de alta calidad con firma digital
- Preparado para operar en red.



RED MEDLINKNET

Servicio de Red para el Envío de Exámenes a Través de Internet Disponible

- Facilita la sincronización de estudios de manera remota.
- Permite operar de forma eficiente una red de interpretación de electrocardiogramas.
- Respalda todos los estudios
- Acelera la entrega de resultados.



Distribuido por

Mediventa

www.mediventa.com




Cardio SW

Rest ECG

Sistema para Interpretación de ECG

Una Solución Integral

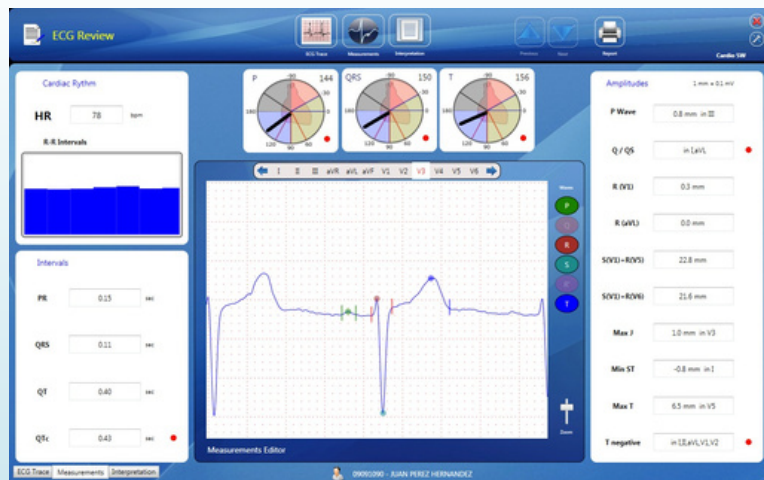

Conexión con ECG digitales

CardioSW ofrece compatibilidad con los ECG CV200 a través de conexión USB y con el ICV1200 mediante Bluetooth inalámbrico, permitiéndole elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.





Funciones Avanzadas

- Registro y manejo de pacientes
- Toma de examen en 1 solo paso
- Presentación del ECG en diferentes formatos
- Reimpresión de estudios con ajuste de escalas
- Mediciones automáticas
- Auto interpretación opcional
- Impresión en PDF
- Acceso a Red MedLinkNet
- Trabajo con Doctores vía remota.



Principales ventajas

- Examen al menor costo
- Sin gasto de papel termo sensible
- Rápido y fácil de usar
- Automatización completa del proceso desde la toma del examen hasta la entrega de los resultados
- Informes de alta calidad incluyen firma de médico responsable.
- Respaldo en nube de todos los estudios,

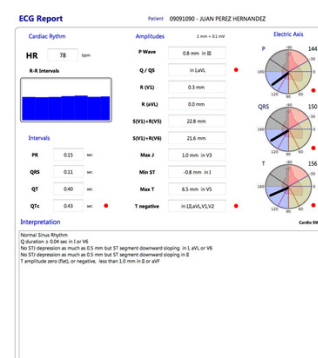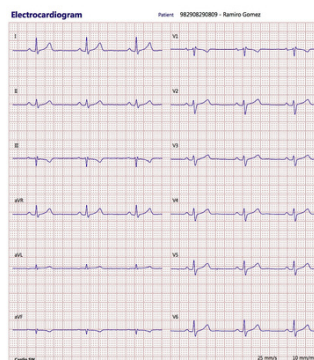

Cómo funciona ?



TOME DEL ESTUDIO
EN 1 SOLO PASO



SUBA EL ECG A
MEDLINKNET CLOUD



EL DOCTOR
COMPLETA INFORME
VIA REMOTA



UD. RECIBE Y
ENTREGA INFORME
COMPLETO



ECG iCV1200

**Electrocardiógrafo
Digital inalámbrico**

Ideal para pruebas de esfuerzo

Gracias a su diseño portable, el CV1200 se emplea en pruebas de esfuerzo, resaltando su habilidad para medir parámetros de rendimiento de manera precisa y eficiente, incluso cuando el paciente está en movimiento. Este dispositivo es esencial para evaluar la respuesta del cuerpo durante el ejercicio, permitiendo un análisis exhaustivo de la condición física del paciente y el diagnóstico de cardiopatía isquémica de forma no invasiva



Uso con CardioSW - Stress Test

Se emplea con iCV1200 para realizar ECG en esfuerzo, conducir las pruebas y emitir los informes finales de los estudios en su propia PC / Laptop.




Integración con bandas ergométricas

Permite el manejo automático de bandas TrackMaster compatibles como Phillips, Mortara, GE, Shiller y otros, permite la configuración con bandas ya existentes.



Portabilidad total

La conectividad inalámbrica Bluetooth, combinada con el soporte diseñado para el paciente, garantizan una amplia movilidad durante el examen.

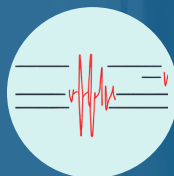

Calidad Superior

La implementación de filtros digitales y técnicas de inmunidad a interferencias aseguran la mejor calidad en el registro del ECG durante la prueba de esfuerzo.

Consulte con nuestros ex



Distribuido por

Mediventa

www.mediventa.com




Cardio SW

Stress Test

Programa para Pruebas de Esfuerzo

Automatización total

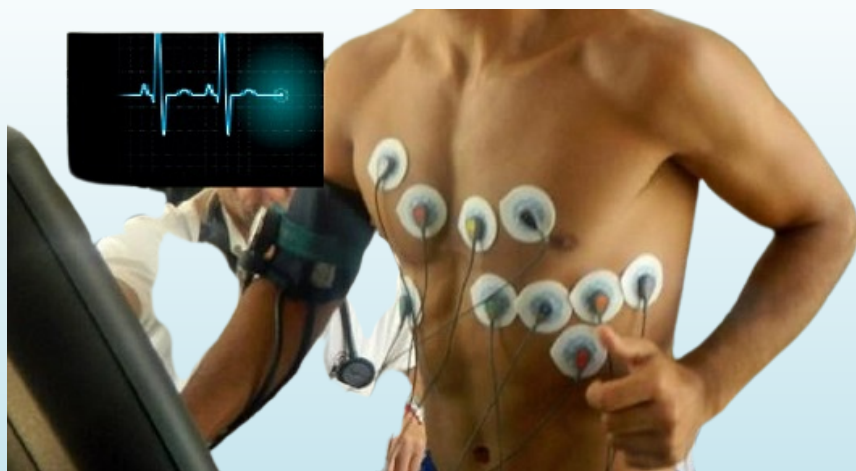


Conexión BT con ECG ICV1200

CardioSW opera con el ECG ICV1200 a través de Bluetooth inalámbrico, lo que proporciona al paciente total movilidad.




Múltiples ventajas


- Registro y gestión de bases de datos de pacientes
- Pruebas de esfuerzo utilizando banda, bicicleta, medicamentos y tablas de inclinación
- Protocolos personalizables
- Mediciones automáticas de frecuencia cardíaca y ST
- Cálculo de las principales variables ergométricas
- Grabación completa del examen para revisión a detalle.
- Presentación del ECG en diversos formatos
- Impresión en PDF
- Acceso a la red MedLinkNet
- Colaboración remota con médicos.

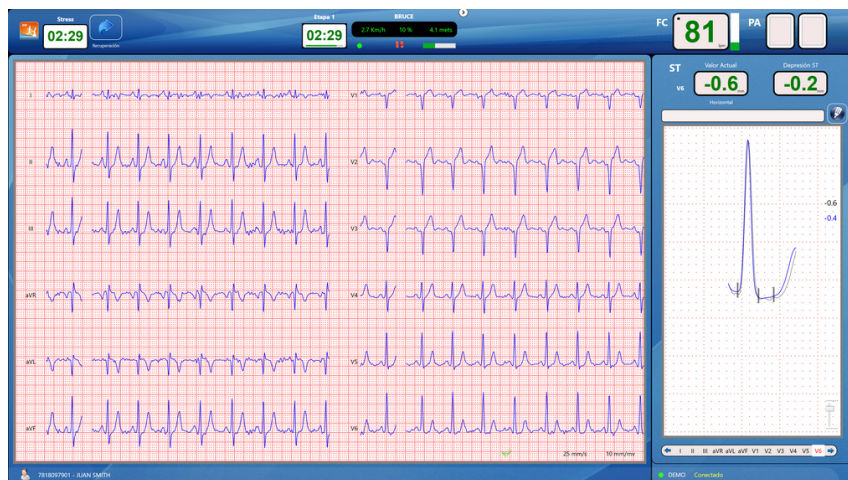

Monitor 12 canales con FC y ST en tiempo real

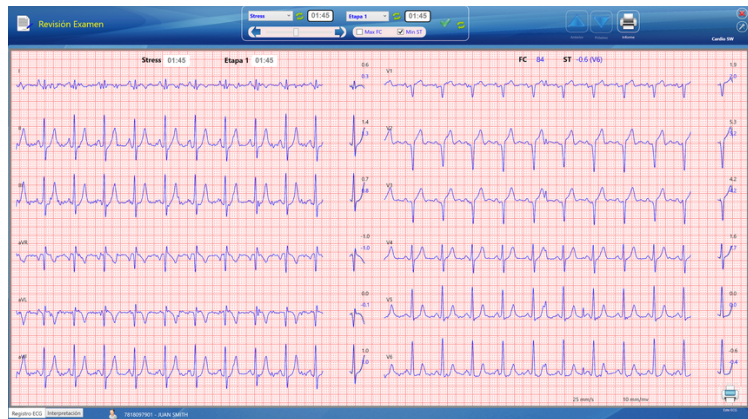

Grabación completa del examen con medición de ST

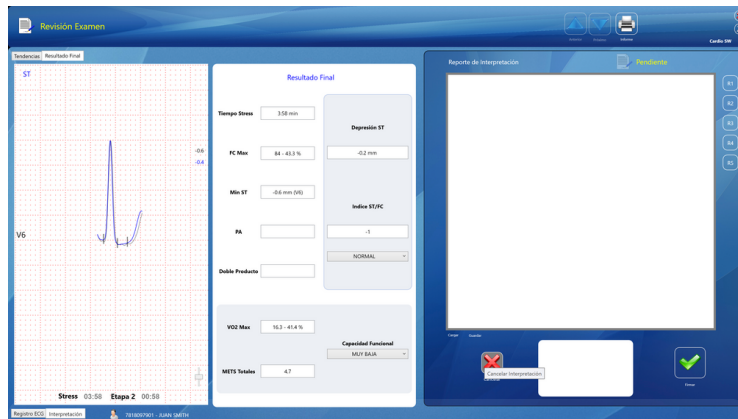

Reportes listos para edición e impresión final



MedLinkNet

CLOUD MEDICAL NETWORK

*Su Red para el informe de
exámenes médicos a distancia*

MedLinkNet es el soporte tecnologico que Ud, necesita para vincular via remota unidades de diagnostico con medicos especialistas y disfrutar de las ventajas de la Telemedicina moderna

Always Connected

Visite
www.medlinknet.com



Red MedLinkNet

Interpretación remota de exámenes médicos



Por qué MedLinkNet ?

- Integración directa con Sistema CardioSW
- Aplicación en estudios de ECG, Holters, Mapas, Espirometrias, EEG y otros
- Trabajo con doctores vía remota.
- Menor tiempo de entrega de resultados
- Menos costos de operación

Nuestros Servicios

- Creación de redes por tipo de examen.
- Administración de grupos de trabajo con vínculo con doctores
- Acceso a nube para transmisión y recepción de exámenes con informe médico.
- Servicio de interpretación remota
- Respaldo en nube por 1 año
- Estadísticas de operación mensual

