

SPIROFORCE

MEDIDOR DE PRESION RESPIRATORIA



Pruebas MEP y MIP ✓

Prueba Snif adicional ✓

Conexión Bluetooth ✓

Aplicacion Android ✓

Informes en PDF ✓



Análisis Revolucionario de Presión Pulmonar

Spiroforce es un dispositivo de vanguardia para realizar mediciones integrales de presión pulmonar. Nuestra tecnología inalámbrica proporciona mediciones precisas en tiempo real de MEP, MIP y SNIF, y la aplicación complementaria muestra los datos de medición y visualizaciones para apoyar la revisión clínica.



Mediciones Precisas de Presión: Sensores digitales avanzados aseguran lecturas precisas de MEP, MIP y SNIF

Conectividad Inalámbrica: Transmisión de datos en tiempo real con integración iBT con nuestra aplicación.

Dispositivo de Grado Médico: Cumple con los estándares internacionales incluyendo normas ATS/ERS.

Software: App para Mac y Windows.

App Movil: Disponible para teléfonos Android

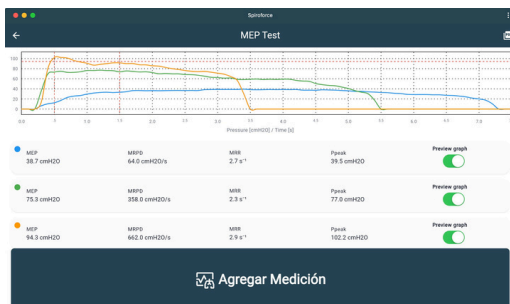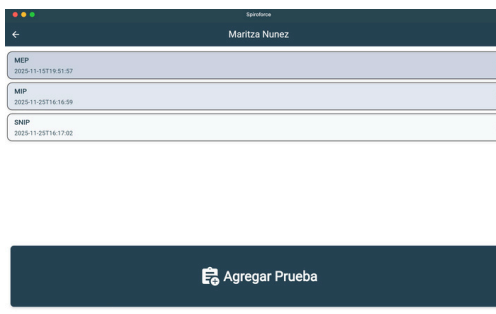


Informe de Prueba

Nombre: Maritza
Apellido: Nunez
Fecha de Nacimiento: 4 oct 1958 0:00

Peso: 80.0 kg
Altura: 160.0 cm


Tipo de Prueba: MEP
Fecha: 15 nov 2025 19:51

Mejor Valor

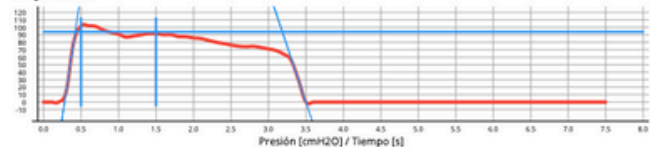

MEP [cmH2O]	PPEAK [cmH2O]	MRPD [cmH2O/s]	MRR [s ⁻¹]	VAR [%]
94.3	102.2	662.0	2.9	40.7

Todos los Intentos

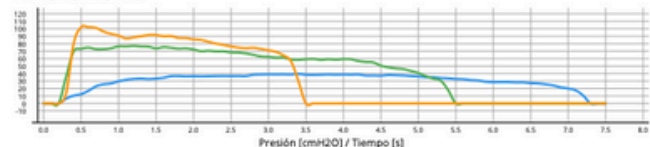


Todos los Intentos

Color	Trial	MEP [cmH2O]	PPEAK [cmH2O]	MRPD [cmH2O/s]	MRR [s ⁻¹]
Blue	Intento 1	38.7	39.5	64.0	2.7
Green	Intento 2	75.3	77.0	358.0	2.3
Orange	Intento 3	94.3	102.2	662.0	2.9

Valores de referencia

Modelo de Referencia	Índices	Valor Observado	Referencia	% de Referencia
Wilson	MEP	94.3	91.5	103.0

Médico/Profesional de la salud: _____ Firma: _____

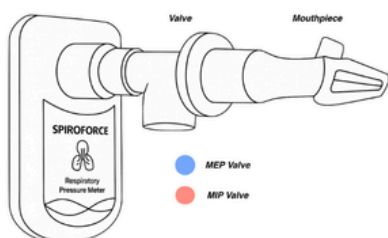

www.spiroforce.com



WEB APP



MOBILE APP



USER MANUAL

